



MANUEL MYNANOVIEU

Révision 5.0

MySirius

TABLE DES MATIÈRES

- I. Description..... 3
- II. Fonctionnalités..... 4
 - 1. Identification et Synchronisation avec MySirius 4
 - 2. Détection & connexion aux Links 4
 - 3. Ecrans d’affichage des mesures 5
 - 4. Ajout de commentaires..... 8
 - 5. Mode dégradé 8
 - 6. 6. Options 8

I. DESCRIPTION

MyNanoView est une application qui sert d'écran d'affichage déporté aux Nova SPYs & Nano SPYs. C'est une application pour tablettes et smartphones téléchargeable gratuitement : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jri.mynanoview>

Cette application assure la visualisation des températures des Nova SPYs & Nano SPYs même en cas de coupure réseau sur un site MySirius. Il faudra toutefois pouvoir la synchroniser avec MySirius afin d'importer la liste des appareils du client et d'autoriser la connexion.

L'application communique directement en BlueTooth avec un Link équipé d'un module BLE (module BlueTooth optionnel)



Nano LINK
version BLE




BlueTooth
communication



II. FONCTIONNALITÉS

1. Identification et Synchronisation avec MySirius

- Lors de la première utilisation de l'application, vous devez vous connecter avec vos identifiants MySirius.

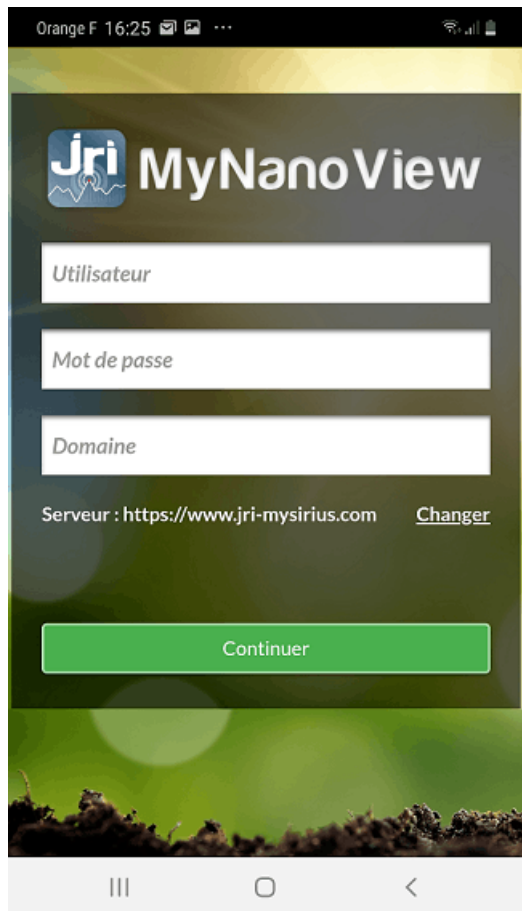

Une fois connecté, une synchronisation sera automatiquement lancée.

Vos identifiants seront stockés dans l'application afin de pouvoir lancer des synchronisations ultérieurement sans avoir à vous identifier à nouveau.


- La synchronisation de l'application avec MySirius nécessite une connexion internet et permet de télécharger les données de votre parc :
 - La liste des Links/Relays
 - La liste des enceintes
 - La liste des points de mesure, avec leurs seuils

Vous pouvez également effectuer une synchronisation manuellement.

La date de dernière synchronisation est affichée.

2. Détection & connexion aux Links

- Après la première synchronisation, l'application affiche les périphériques BLE disponibles. Sélectionnez un appareil disponible :

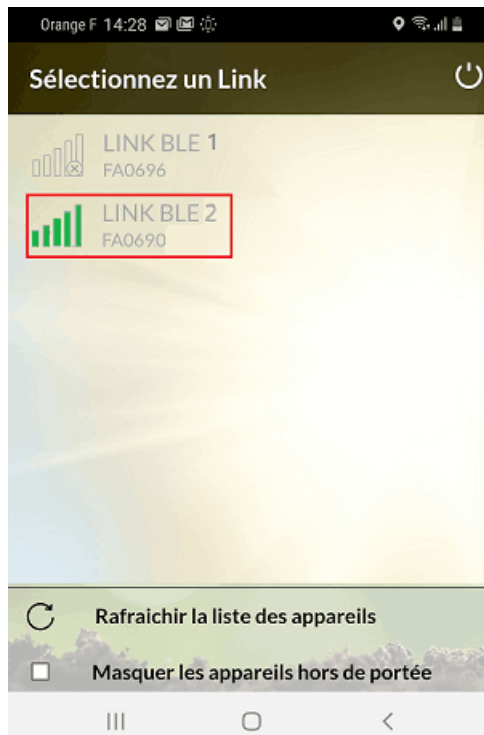

L'application enregistre votre choix pour afficher directement la vue de cet appareil au prochain démarrage. Sinon, l'application affichera de nouveau les appareils disponibles via BLE.

3. Ecrans d'affichage des mesures

- Lorsque l'application se connecte à un Link, elle affiche la liste des Nova SPYs & Nano SPYs communicant avec ce Link, regroupés par enceinte.

L'application stocke les mesures de chaque Nova SPY ou Nano SPY en cache (non sauvegardé lors de la fermeture), avec un maximum de 24h glissant.


- Tout comme sur MySirius, l'affichage des enceintes contient la valeur de dernière mesure de chaque point de mesure, mise à jour en temps réel en indiquant la date de la dernière mesure.
- Les mesures sont affichées par défaut en mode numérique :



- Le bouton “Options”  permet d’ouvrir un menu donnant la possibilité de basculer de l’affichage numérique vers le mode mini-graphiques.



- En fonction du mode d’affichage sélectionné, le clique sur une enceinte ouvre la page avec le détail des mesures :

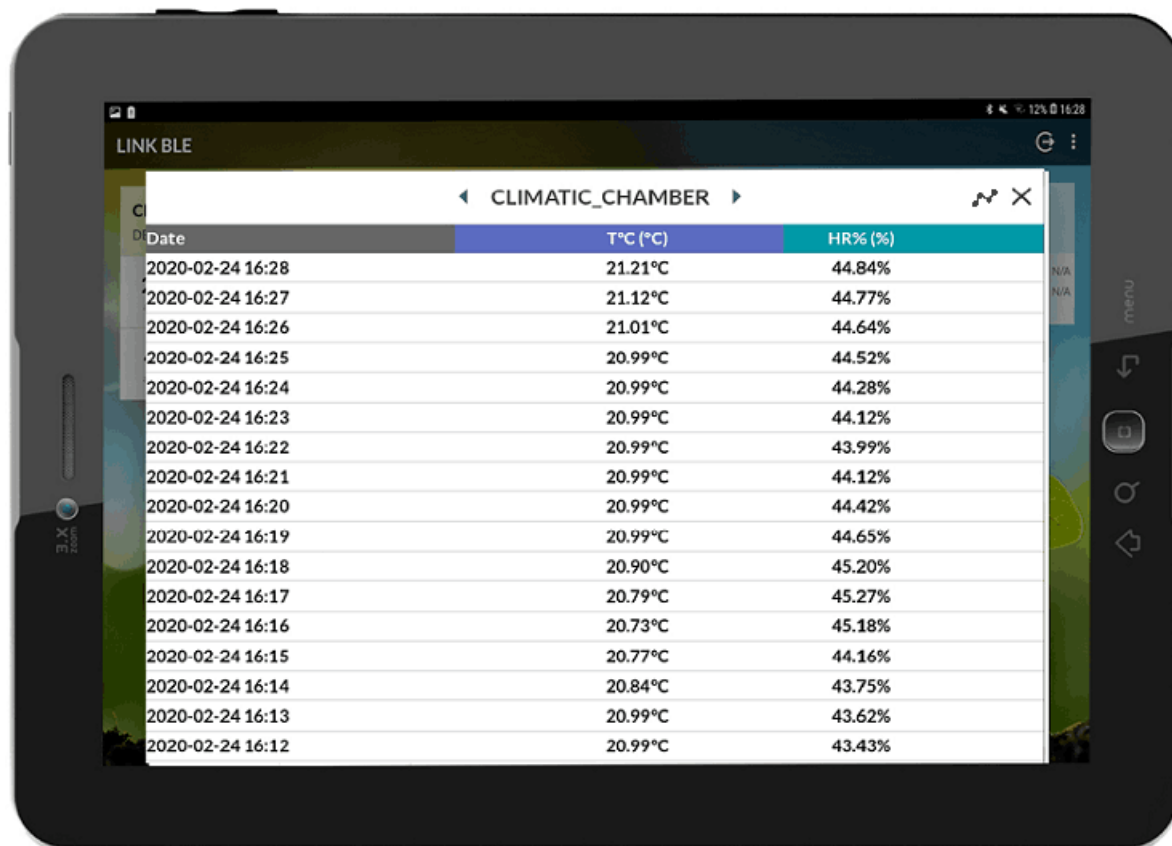

— Il est possible de basculer d'un mode à un autre en utilisant le bouton "graphe"  , ou le bouton "tableau" 



4. Ajout de commentaires


- En cliquant sur un point du graphe, vous pouvez ajouter un commentaire sur un point de mesure, une enceinte ou l'ensemble des enceintes visibles. Ce message sera horodaté, afin de servir comme point de contrôle, notamment lorsque l'installation fonctionne en mode dégradé.

Les commentaires seront envoyés à MySirius lors d'une synchronisation.



5. Mode dégradé

- Si la communication est interrompue entre un ou plusieurs Nova SPY ou Nano SPY et MySirius pendant une durée déterminée (valeur configurable sur MySirius) alors l'application affiche un bandeau d'information en orange avec l'indicateur "mode dégradé" sur le ou les Nova SPY ou Nano SPYs concernés.

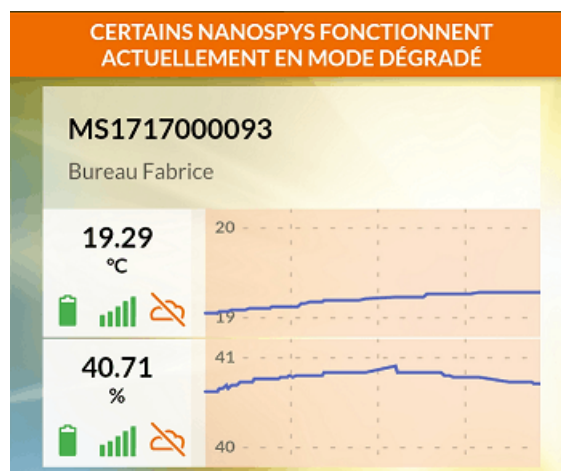


- L'application affiche les enceintes en alarme uniquement en mode dégradé, en se basant sur les seuils alarmes du mode dégradé configurées dans MySirius. L'affichage des alarmes est similaire à MySirius (vignette de l'enceinte colorée).

6. Options

- Un clic sur le bouton déconnexion du Link  permet de revenir sur l'écran de sélection d'un Link

- D'autres options sont disponibles en cliquant sur le bouton 

- Un bouton de synchronisation manuelle, affichant la date de dernière synchronisation ainsi qu'une alerte
- Une case à cocher permettant de basculer l'affichage des vignettes en mode « mini-graphiques »
- Une case à cocher permettant de masquer toutes les enceintes dont le Link n'a pas encore reçu de mesures
- Un bouton déconnexion utilisateur, permettant de revenir à l'écran d'identification

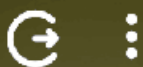

Synchroniser maintenant

Dernière synchronisation : 31/02/2019

Vous avez des données à synchroniser!



Affichage mini-graphiques



Masquer les enceintes sans mesures



Déconnexion utilisateur